

Ray-Ran



MFR 系列 熔体流动指数仪

工业物理旗下英国 Ray-Ran

Ray-Ran 自 20 世纪 70 年代末开始生产熔融指数测试系统，因此，Ray-Ran 品牌早已成为该市场值得信赖的全球领导者。最新系列的 MFR 熔体流动测试系统可满足各级客户的熔体流动要求。从简单的“方法 A”测试到微处理器控制的多切片和熔体体积速率数据，MFR 系列中的 3 个型号都能为任何质量控制、质量保证或研究熔体流动应用提供正确的解决方案。

RR-MFR300

MFR300 熔融指数仪配备高精度光学编码器，可提供增强的技术和自动化功能，从而扩展实验室熔体流动测试，以支持所有四种常见熔体流动方法 A、B、C 和 D 对流速比率 (FRR) 计算的要求。

随附的 Techni-Test™ 数据分析软件以图形和表格形式显示结果，并带有可导出的 CSV 文件。



RR-MFR200


MFR200 使"方法 A"测试更容易、更可重复，采用微处理器控制的提示程序和自动切割装置，确保切割一致。


随附的 Techni-Test™ 数据分析软件以图形和表格形式显示结果，并带有可导出的 CSV 文件。



RR-MFR100

MFR100 为最基本和最常见熔体流动测试的"方法 A"测试要求提供了一种简单而强大的解决方案。

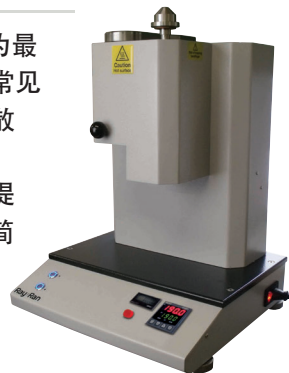

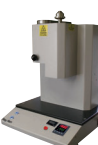	型号	显示	重量 (kg)	包含标准项目	0-450度温度范围*	0.1摄氏度温度精度	可选砝码加载器	MFI (方法A) 9/10分钟	包含标准项目	结果储存**	熔体密度	微处理器控制	自动切断	USB和以太网接口	控制软件	光学编码器	MVR (方法B) cm/10min	多个MFI数据点	剪切速率 (1/s)	剪切应力	表现特性粘度	粘度 (Pa·s)	启用无线网络
	MFR300	触摸屏	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	MFR200	触摸屏	45	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
	MFR100	三色显示	35	✓	✓	✓	✓	✓	✓														

* 所有型号均提供 500° C 温度范围选项

** MFR200 具有内部微处理器存储功能，可存储最多 10 个测试结果。MFR300 允许用户通过 USB、以太网或无线连接将结果保存到闪存驱动器或 PC 上

Industrial Physics 工业物理

电话: 400 821 0694

邮箱: info.china@industrialphysics.com

网址: www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

